

# InBody Touch 24i

## ユーザーマニュアル

## InBody Touch 24iの設置に関する取扱説明書

この度はInBody Touch 24iをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本ユーザーマニュアルにはInBody Touch 24iの機能を分かりやすく詳細に記述しており、よくお読みいただくことで正しくInBody Touch 24iをご活用いただけます。必要な時にすぐ取り出せるよう大切に保管してください。マニュアルの指示に従うことで、より安全かつ効果的に使用することができます。

## 本社

### InBody

InBody Co., Ltd. [HQ]

InBody Bldg., 625, Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul 06106 Korea

TEL: +82-2-501-3939 FAX: +82-02-6919-2417

Customer Center: +82-2-1899-5841

Website: inbody.com E-mail: info@inbody.com

 InBody Co., Ltd. [MANUFACTURER]

15, Heugam-gil, Ippang-myeon, Seobuk-gu, Cheonan-si,

Chungcheongnam-do 31025 KOREA

TEL: +82-41-581-3003 FAX: +82-41-581-3103

Website: inbody.com E-mail: info@inbody.com

## お問合せ先

株式会社インボディ・ジャパン(輸入販売元)

〒136-0071 東京都江東区亀戸1-28-6 タニビル

TEL: 03-5875-5780

FAX: 03-5875-5781

Website: <https://www.inbody.co.jp>

E-mail: [ibody@inbody.co.jp](mailto:ibody@inbody.co.jp)

## 著作権

本書の内容の一部または全てを無断でコピーしたり、他の媒体(磁気、電気、写真等の如何を問わず)や他システムに転用したりすることを禁じます。本書の校正には注意を払っておりますが、誤字・脱字がある可能性があります。予告なしに変更することがあります。

(株)インボディ・ジャパンは本書に述べられた必要条件を満たさないことによってもたらされた損害については一切の責任を負いかねます。

製品の外観・仕様などは改良のため予告なく変更される場合があります。

©2025 InBody Co., Ltd. All rights reserved.

# 目次

<b>1 安全のために必ず守ること</b> .....	<b>4</b>	<b>6 製品保証</b> .....	<b>12</b>
1.1 使用されている安全記号.....	4	6.1 保証期間.....	12
1.2 使用時の注意事項 .....	4	6.2 保証規定.....	12
<b>2 製品構成と各部名称</b> .....	<b>5</b>	6.3 カスタマーセンターについて ...	12
2.1 製品構成.....	5	<b>7 製品分類と仕様</b> .....	<b>13</b>
2.2 各部名称.....	5	7.1 分類.....	13
<b>3 製品の設置</b> .....	<b>7</b>	7.2 製品で使用される記号.....	14
3.1 設置環境.....	7		
3.2 設置方法.....	7		
3.3 組立方法.....	7		
<b>4 運送と保管</b> .....	<b>10</b>		
4.1 再梱包の方法 .....	10		
4.2 保管環境.....	10		
<b>5 よくある質問</b> .....	<b>11</b>		
5.1 製品に関するFAQ.....	11		

# 1 安全のために必ず守ること

## 1.1 使用されている安全記号



### 警告

この指示に従わず誤った取扱いをすると、測定者の怪我に繋がる恐れがあります。



### 注意

この指示に従わず誤った取扱いをすると、製品の損傷に繋がる可能性があります。

## 1.2 使用時の注意事項



### 注意

- 製品の分解と改造  
製品を任意に分解したり改造したりしないでください。製品を分解・改造した際に生じた損傷及び被害に関して、(株)インボディ・ジャパンは責任を負いかねます。
- 磁性のある物質に近づけた場合  
磁性の強い物質・製品に接触すると、製品の誤作動や故障に繋がる可能性があります。
- 製品が衝撃を受けた場合  
製品に過度な衝撃が加わると、破損や故障の原因となります。
- 温度や湿度の高い場所での使用  
ヒーターやストーブなど暖房器具の周辺や温度が異常に高い場所に製品を設置すると、製品の故障に繋がる可能性があります。また製品に水が入ったり、湿度が異常に高い場所での使用は、故障や感電の原因となります。
- 非純正品の使用  
(株)インボディ・ジャパンが提供するアクセサリーを使用してください。非純正品や製品規格に合わないアクセサリーを使用すると、故障の原因となります。


本製品は家庭用以外の設備内で使用することを意図したEMC規格クラスA適合品です。家庭環境ではなく、産業や商業環境でご使用ください。

- 無線設備は電波混信の可能性があります。人命に関わるサービスとして本製品を使用することはできません。
- 温度や湿度、気圧が高すぎたり低すぎたりすると、製品の動作に影響する可能性があります。製品仕様に記載されている動作環境でご使用ください。


## 2 製品構成と各部名称

### 2.1 製品構成


InBody Touchの製品構成は次のとおりです。各構成品が全て揃っているか確認してください。設置前に構成品に亀裂などの異常がないかも確認してください。

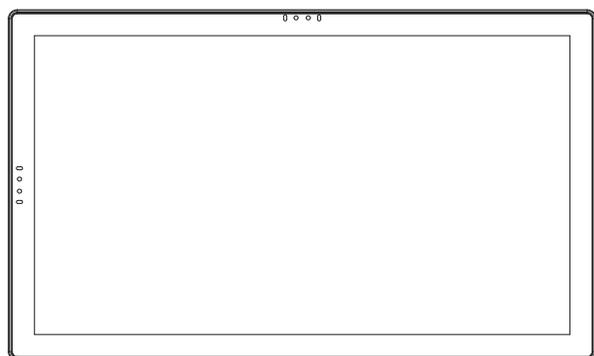

InBody Touch

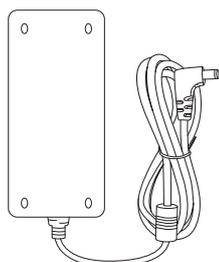


電源アダプタ

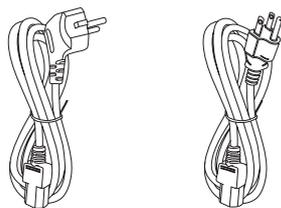

電源コード




VESA規格ネジ  
(M4×10) 4本

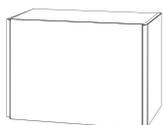

アクセサリ保管箱



リモコン

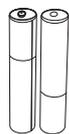


単4形電池

### 2.2 各部名称


InBody Touchの各部名称は次のとおりです。

#### InBody Touch外観

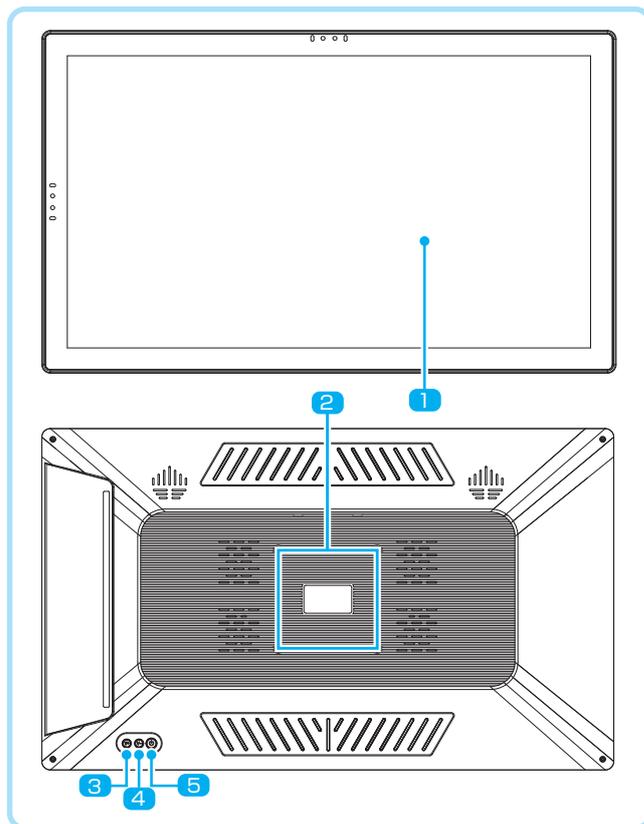


- 1 ディスプレイ
- 2 VESAマウント 100×100mm
- 3 音量+
- 4 音量-
- 5 電源ボタン

## InBody Touch端子外部

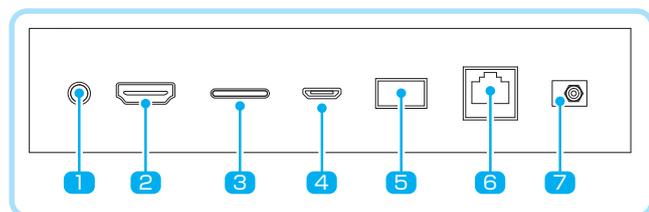

- 1 AUX
- 2 HDMI
- 3 TFカード
- 4 OTG
- 5 USB
- 6 LANポート
- 7 DC-IN

## リモコン機能

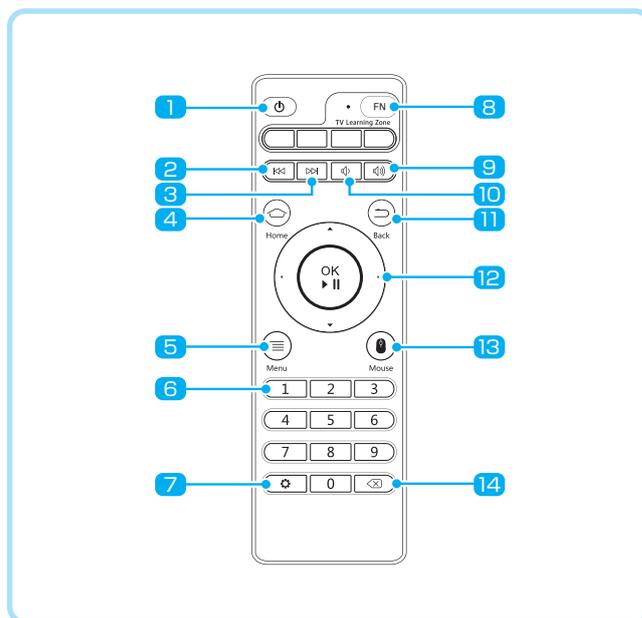

- 1 電源ボタン: 1. 短く押すとスリープモードに切り替え  
2. 長押しすると電源OFF
- 2 戻るボタン: 前のファイルを再生
- 3 次へボタン: 次のファイルを再生
- 4 ホームボタン: ホーム画面へ移動
- 5 メニューボタン: 設定とオプションへ移動
- 6 数字ボタン: 数字入力
- 7 設定ボタン: 設定へ移動
- 8 FNボタン: TVリモコンの機能コピー
- 9 音量を上げる: 再生時の音量を上げる
- 10 音量を下げる: 再生時の音量を下げる
- 11 戻るボタン: メニューや設定など前に戻る時に使用
- 12 OKボタン: アイコンやファイル選択後に押すと実行
- 13 マウスボタン: マウスモードのON/OFF
- 14 クリアボタン: 入力した文字の消去

# 3 製品の設置

## 3.1 設置環境

InBody Touchを設置する前に設置環境を確認してください。本製品は室内で使用する装置です。設置環境は必ず下記の基準を満たさなければなりません。


適正温度	0~50℃
相対湿度	30~75%RH(結露がないこと)
適正気圧	70~106kPa

## 3.2 設置方法

### ⚠ 注意

- カーペット上で使用すると装置に静電気による損傷が起きる可能性があります。カーペット上に設置せざるを得ない場合、静電防止マットを使用して設置してください。
- 水平で振動のない床に設置してください。表面に凸凹のある場所に設置するとInBody Touchが倒れる可能性があります。
- InBody Touchを洗剤で拭かないでください。洗剤が内部に流れ込むと、腐食が起これ機器の故障に繋がる恐れがあります。


1 InBody Touchを段ボール箱から取り出します。

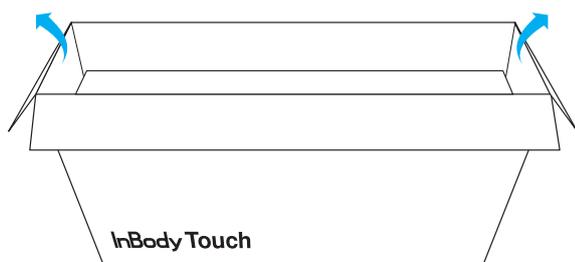

梱包箱

2 梱包用ビニールカバーを取り除きます。

### 梱包用ビニールカバー

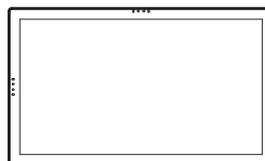

### ⚠ 注意


- ディスプレイの部分を持って製品を動かさないでください。
- 設置後に運搬が必要な場合は、製品を再梱包してから運搬してください。納品時の梱包材を保管する必要があります。
- 梱包材及び他の廃棄物は関連の法規に従って処分してください。


## 3.3 組立方法

### 📖 注意事項

- ディスプレイスタンドを組み立てる際に、付属のボルトのサイズが万が一合わない場合は、(株)インボディ・ジャパンにお問い合わせください。

1 構成部品が全て揃っているか確認します。

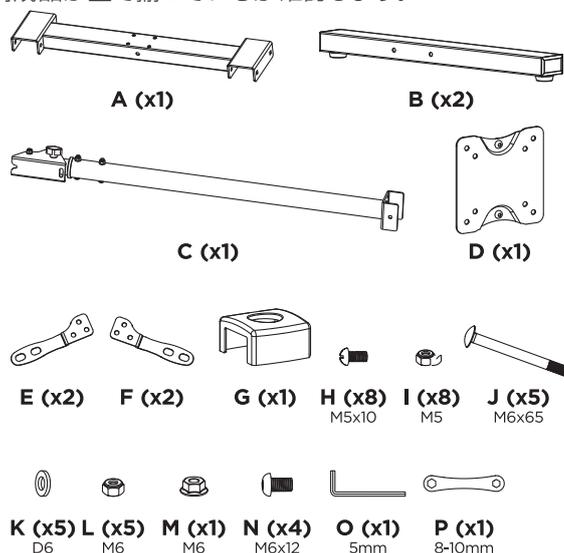


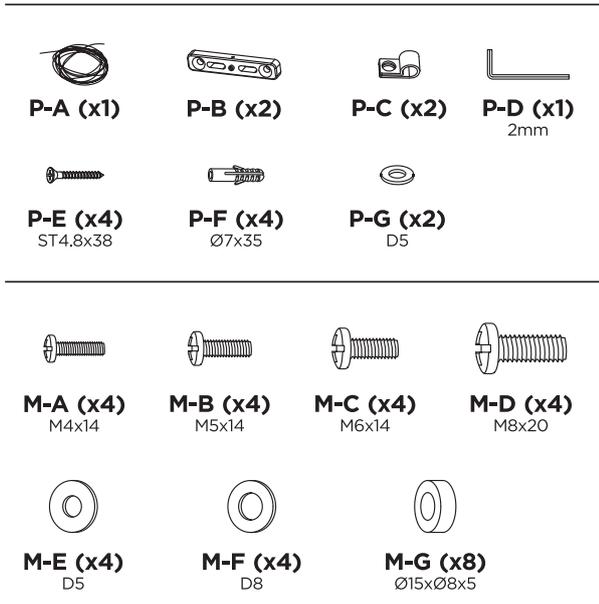


**注意**

ディスプレイスタンドには転倒防止のための部品が含まれています。本書に従って正しくディスプレイスタンドを組み立ててください。本書の指示に従わず誤った取り扱いをした際に生じた損傷及びそれによる被害に関して、(株)インボディ・ジャパンは責任を負いかねます。


**2** ディスプレイスタンドの下部を組み立てます。

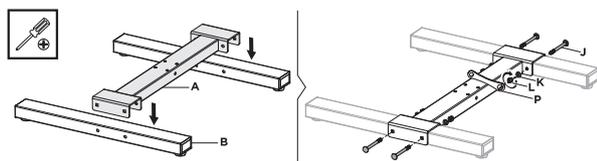


**3** 支柱バーに結合されているネジを外し、中の支柱を取り出します。

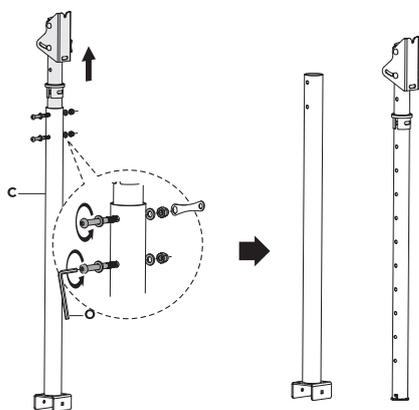


**4** 仕上げカバー(G)を挿入した後、2本の支柱バーを組み立てて外したネジを結合します。

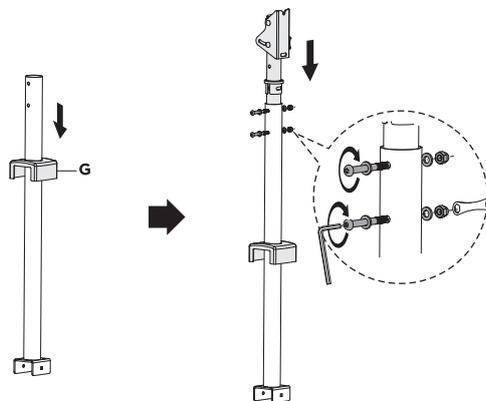



**5** ディスプレイスタンドの下部と支柱を組み立てます。

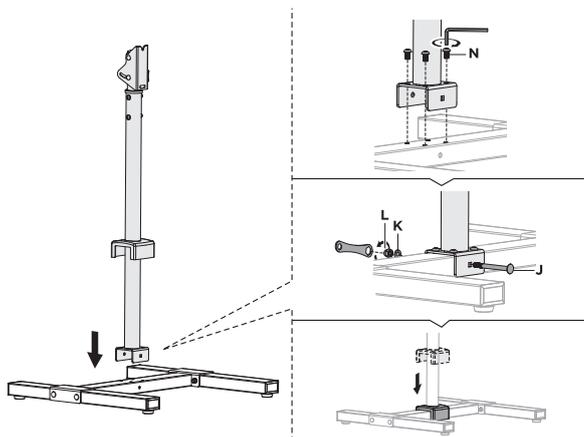


**6** モニターにVESAプレート(D)を取り付けます。

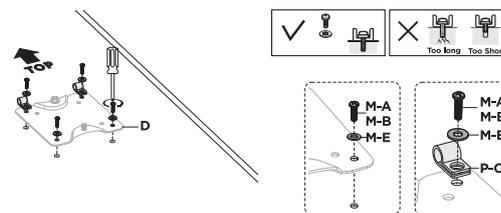


- 7 モニターのVESAマウントにVESAプレートが合わない場合、VESAアダプタ(E)(F)をVESAプレートに取り付けて調整します。

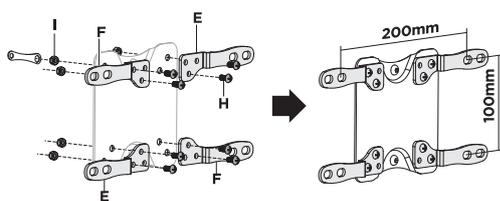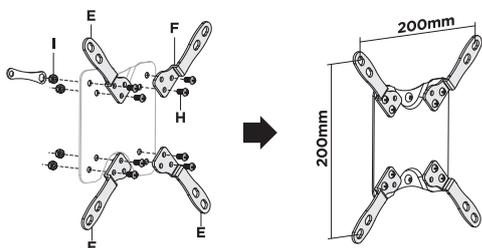

- 8 VESAアダプタを取り付けたVESAプレートをモニターに取り付けます。

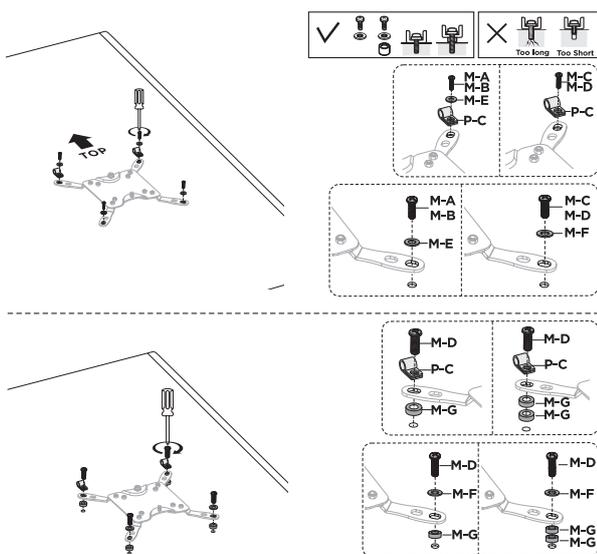

- 9 モニターをディスプレイスタンドの上部に取り付けます。(安全のために2人以上で設置してください。)

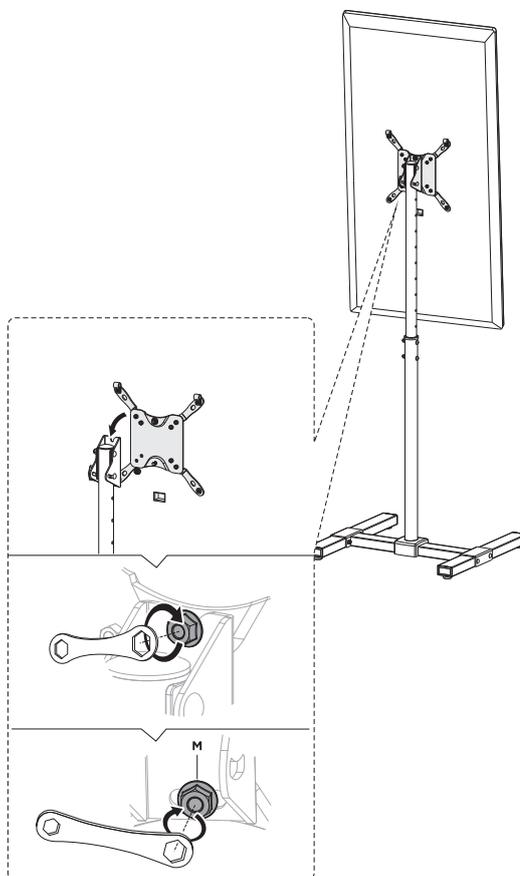

## 4 運送と保管

### 4.1 再梱包の方法

設置を完了してからはなるべく製品を移動させないでください。運搬が必要な場合は、下記の手順で再梱包してから運搬してください。

- 1 InBody Touchの電源を切ってください。
- 2 接続されている全ての電源アダプタ、ケーブルを取り外します。
- 3 InBody Touchを梱包用ビニールカバーで包みます。




梱包用ビニールカバー



#### 注意


再梱包の際は、必ず納品時の梱包材を使用してください。

- 4 InBody Touchを梱包箱に入れてください。

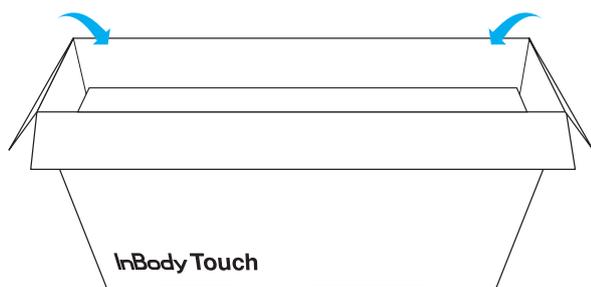

包装箱

- 5 梱包箱を密封してください。

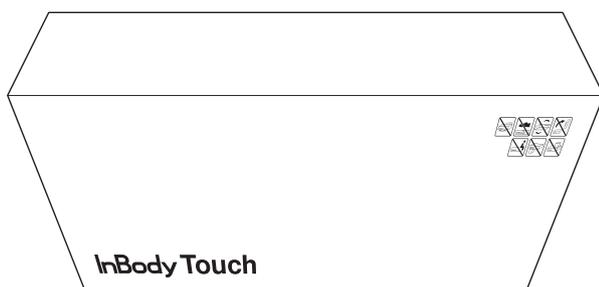

包装箱

### 4.2 保管環境

製品を長期間保管するには、下記の基準を満たす必要があります。

適正温度	-20~60℃
相対湿度	10~80%RH(結露がないこと)
適正気圧	50~106kPa

# 5 よくある質問

---

InBody Touchで何か問題が生じた場合は、次のよくある質問から関連する情報を確認してください。それでも問題が解決しない場合は、(株)インボディ・ジャパンにお問い合わせください。

## 5.1 製品に関するFAQ

**質問:** インターネットを接続する必要がありますか？

**回答:** ・ インターネット接続なしでも使用できます。ただしアプリケーションの更新やより多くの機能を活用するには、有線もしくは無線(Wi-Fi)でネットワークに接続することをお勧めします。

**質問:** どのように文字を入力しますか？

**回答:** ・ マウスを操作して画面に表示される画像キーボードより入力できます。また別途USBキーボードを接続して入力することもできます。  
・ タッチモニター製品のため、画像キーボードを直接タッチして入力できます。

**質問:** 解像度の変更は可能ですか？

**回答:** ・ 1080×1920(1080p)の解像度に最適化されているため変更できません。

**質問:** ストレージとメモリの使用容量が違うのはなぜですか？

**回答:** ・ ストレージはOSや製品機能を動作させるソフトウェアの容量として使用され、メモリ容量よりも小さくなります。ストレージはユーザーの使用状況によって異なり、ソフトウェアのアップグレードでも変わります。

# 6 製品保証

---

## 6.1 保証期間

- 本体: お買い上げ日から1年
- リモコン: お買い上げ日から3か月
- ケーブル類: お買い上げ日から1か月
- 基本構成品以外の商品や消耗品は製品保証が適用されません。

## 6.2 保証規定

次のような状況で本製品の内容を変更、または損傷させた場合、製品保証の対象外となります。

- お客様ご自身で製品を分解した場合
- お客様の過失により故障した場合(落下・衝撃・浸水や異物汚染による腐食・無理な作動など)
- 火災・水害・地震などの天災による故障
- 納品時に付属していない非純正品使用による故障
- ファームウェアアップグレード時の過失による製品メモリの故障
- 保証期間が終了した場合

## 6.3 カスタマーセンターについて

- カスタマーセンター  
TEL: 0120-900-369(フリーアクセス)  
URL: <https://www.inbody.co.jp>
- お問い合わせの受付時間は、平日9:00～18:00です。  
(土日祝及び弊社指定休日を除く)

# 7 製品分類と仕様

## 7.1 製品分類

### 主要仕様

製品名	InBody Touch 24i
表示画面	24インチ
サイズ	578(W)×348(H)×43(D)mm
重量	4.2kg
電源入力	AC100-240V <sup>~</sup> 、50/60Hz、1.5A
電源出力	DC12V <sup>±</sup> 、3A
CPU	Dual-Core、Cortex-A72 1.8GHz and Quad-Core Cortex-A53 1.5GHz
GPU	ARM Mali -T864 GPU
メモリ (RAM/FLASH)	LPDDR3 RAM 4GB / EMMC 5.0 32G (64G optional)
解像度	IPS 1080p
画面の輝度	300cd
イーサネット	GIGA Ethernet LAN RJ45
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz
マルチメディア	4K H265/H264 video decoders、1080P other video decoders(VC-1、MPEG-1/2/4、VP8)、1080P video encoder for H.264 and VP8、Video post processor: de-interlace、de-noise、enhancement for edge/detail/color
動画コーデック	4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 video decoding、up to 60fps、1080P multi-format video decoding (WMV、MPEG-1/2/4、VP9、H265、H264) 1080P video coding、supports H264/H265
動画フォーマット	MKV、WMV、MPG、MPEG、AVI、MOV、ISO、MP4RM、JPG
音声フォーマット	MP3、WMA、AAC、WAV、OGG、AC3、FLCA
接続	USB2.0/Ethernet
Bluetooth	BLE互換
タッチ対応	静電式タッチ

入力端子	USB3.0/USB2.0 type2 Port、Type-C (OTG) 10/100/GIGA Ethernet LAN High - Speed EMMC extension interface 電源入力(DC12V 3A)
出力端子	内蔵スピーカー HDMI(映像/音声統合)
無線信号	Wi-Fi受信サポート(2.4GHz/5GHz)
画像フォーマット	JPG、JPEG、MJPEG、PNG、GIF
対応言語	日本語・英語・韓国語・ドイツ語・中国語など Androidに対応する言語
動作環境	0~50℃、30~75%RH(結露がないこと)、70~106kPa
保管環境	-20~60℃、10~80%RH(結露がないこと)、50~106kPa

本製品は家庭用以外の設備内で使用することを想定して適合評価を受けた製品です。家庭環境で使用すると、電波干渉の恐れがあります。

## 7.2 製品で使用される記号

### 安全記号



製品を使用する前にユーザーマニュアルをお読みください。



警告・注意

### 認証記号



E115696  
Complies with UL 62368-1  
CSA C22.2 No. 62368-1



European Conformity



R 214-240358

### その他記号



電源オン




電源オフ



メーカー



シリアル番号

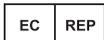

Authorised representative in the European Community



Disposal of old Electrical & Electronic Equipment (Application in the European Union and other European countries with separate collection system.)

This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling this product, please refer to local governing ordinances and recycling plans.



FCC ID: F60INBODYTOUCH  
and IC ID: 22967-INBODYTOUCH  
FCC statement

Note : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

\*This product complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This product may not cause harmful interference, and (2) this product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



## Warning

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada' s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: This device may not cause interference.

This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.



## Avertissement

*Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux flux RSS exemptés de licence de Innovation, Science et développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:*

*Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.*

*Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable du dispositif*

*Les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées pour assurer une distance de séparation d'au moins 20 cm par rapport à toutes les personnes et ne doivent pas être localisées ou fonctionner conjointement avec d'autres antennes ou émetteurs. Les utilisateurs doivent avoir des conditions de fonctionnement de l'émetteur pour satisfaire à la conformité à l'exposition RF.*



Notification for Conformity Assessment of Broadcasting and Communication Equipment  
Registration Number: R-R-KRZ-KIO-AK-R2  
Item Name (Product Name): Kio AK Kiosk (Android Kiosk)  
Basic Model: Kio AK-43-ST(R2) Stand  
Manufacturer/Country of Manufacture: Shenzhen itemp technology / China  
Manufacturer Importer: Krizer co., Ltd.  
Manufactured Date: Separate Indication