
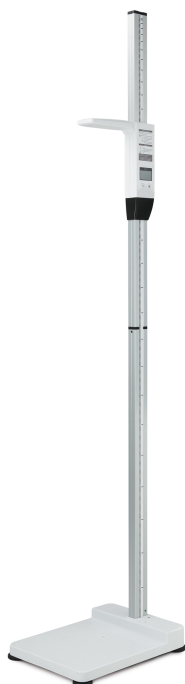


BSM170

For Height Measurement

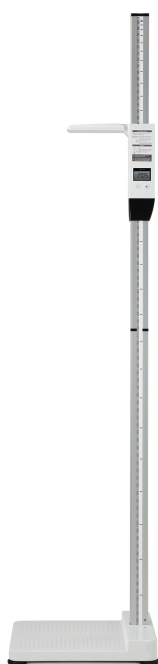

手動身長計BSM170

BSM170は210cmまで身長測定が可能で、大人から子どもまで測定ができる手動身長計です。また、LCD画面を通して身長を素早く確認することができます。

管理しやすい構造

スタンド部分を踏み台に差し込み、ネジで止めるだけなので組立がとても簡単です。測定部を最後まで下ろすことによって正確なキャリブレーションが行えます。

簡単な操作方法

測定部はLCD画面、電源ボタン、測定値を固定するロックボタンで構成されています。踏み台に上がり、電源ボタンを押して測定するとLCD画面で身長を確認できます。

測定データ伝送機能

Bluetooth機能を使って測定値を体成分分析装置InBodyに転送することができます。身長測定を行うことで、より正確なInBody測定が可能です。*1

*1 Bluetooth付きのInBodyとの連動に限ります。

主 要 仕 様

測定項目	身長
測定範囲	350～2100mm
誤差範囲	±1mm
最小測定単位	1mm

機 能 仕 様

結果表示	デジタル方式で測定結果をLCD画面に表示
測定方法	手動測定
測定単位	cmかinchのうち選択可能
身長オフセット	-9.9cm～9.9cmまで0.1cm単位で設定可能
自動節電	150秒後自動節電
表示時間	最大10秒間表示

そ の 他 仕 様

電源	DC 6V(1.5V 単三乾電池 4EA)
外部インタフェース	Bluetooth
外形寸法	W390×L500×H2190mm
製品重量	8.5kg
動作環境	[温度] 10～40℃ [湿度] 30～75%RH [気圧] 70～106kPa
保管環境	[温度] -10～70℃ [湿度] 10～80%RH [気圧] 50～106kPa(結露がないこと)

*性能改良のため仕様・デザインは予告なしで変更することがありますのでご了承ください。

外国製造業者(InBody Co., Ltd. Factory)が取得している認証



NAWI



1639

ヨーロッパ



ISO9001



ISO13485


InBody

株式会社インボディ・ジャパン www.inbody.co.jp


東京本社	〒136-0071 東京都江東区亀戸 1-28-6 タニビル
	Tel 03-5875-5780 Fax 03-5875-5781
大阪営業所	Tel 06-6155-6937 Fax 06-6155-6938
仙台営業所	Tel 022-302-6301 Fax 022-302-6302
名古屋営業所	Tel 052-684-9616 Fax 052-684-9617
広島営業所	Tel 082-236-7630 Fax 082-236-7631
松山営業所	Tel 089-948-9073 Fax 089-948-9074
福岡営業所	Tel 092-292-1766 Fax 092-292-1776

InBody、LookinBodyは株式会社インボディ・ジャパンの登録商標です。

Copyright© 1996～ by InBody Japan Inc. All rights reserved. IC-JPN-BSM170C-200301

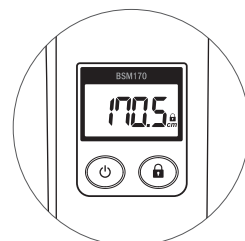

測定画面

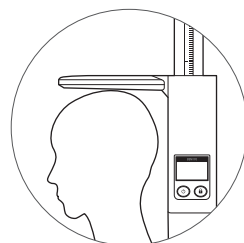

測定イメージ



単位: mm



QRコードを読み取ると、製品紹介をYouTubeで見ることができます。