


# BSM370

For BMI Measurement

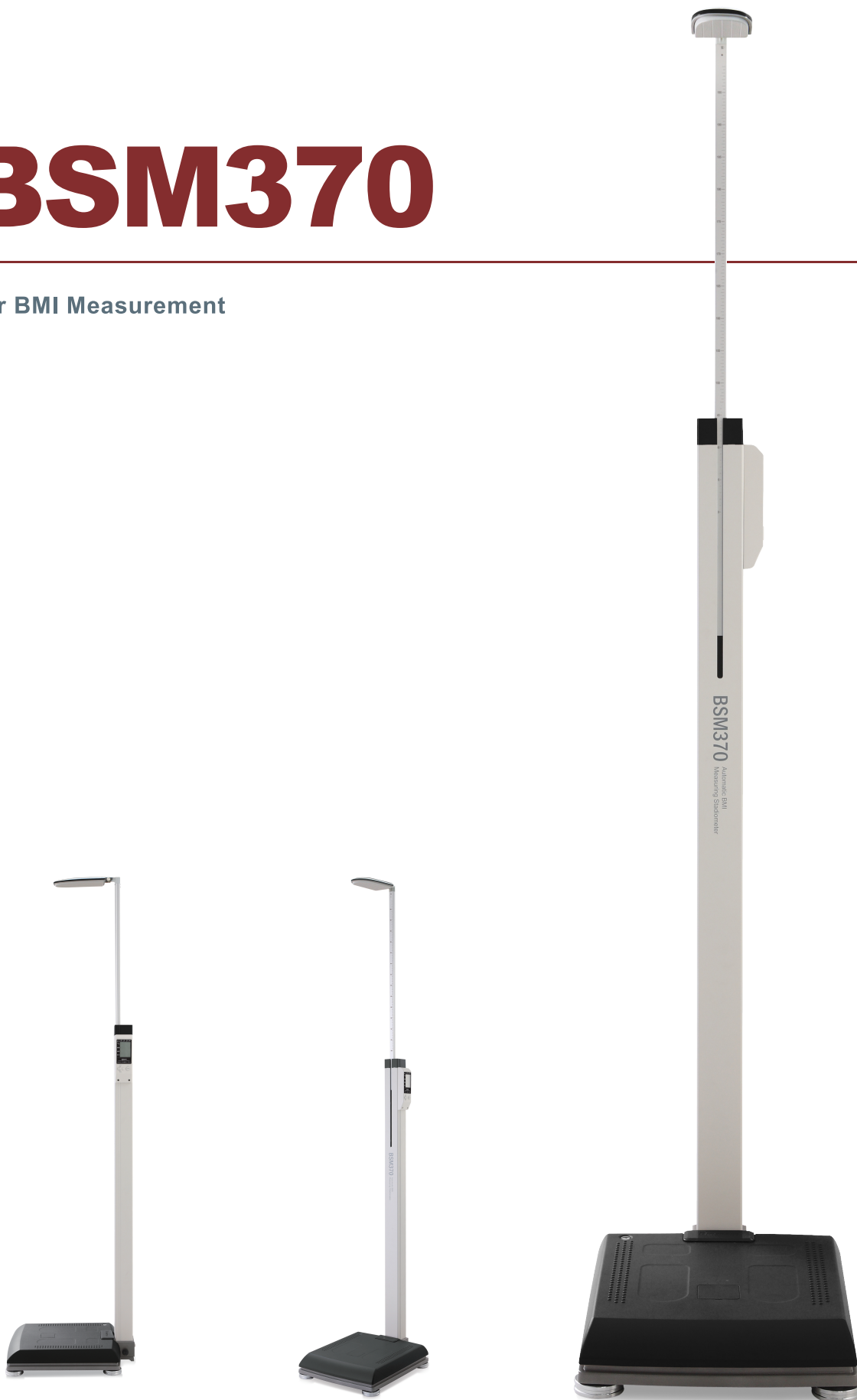

# 折り畳み伸縮式全自動身長体重計

BSM370は誰でも簡単に移動したり、設置したりできるポータブル自動身長体重計です。

## 収納場所を選ばないデザイン

移動に便利なキャスター付きで、折り畳んで簡単に持ち運ぶことができます。

## 運用に便利な機能

遠隔操作ユニットを接続すると、離れた場所からでも机に置いたまま操作&印刷ができます。測定者に合わせ、測定を手動に切り替えることもできます。

## 測定データ伝送機能

測定データを外部装置に伝送し、InBodyや電子カルテとの連動も可能です。

### 主要仕様

測定項目	体重、身長、BMI
体重測定	[ひょう量] 200kg [目量] 0.1kg [精度等級] 3級
身長測定	[測定範囲] 900~2000mm

### 機能仕様

結果表示	デジタル方式で測定結果をLCD画面に表示
零点調節	ウォーミングアップ中に体重零点調節を実施 半自動零点調節可能
測定モード	[体重測定] Hold On/Hold Off [身長測定] 自動/手動 [身長、体重、BMI測定] 自動/手動 [着衣量設定]
着衣量(PT)設定	0.0kg~5.0kgまで0.1kg単位で設定可能
測定単位	kg/cm

### その他仕様

アダプタ	[電源入力] 100-240~、50/60Hz、1.2A [電源出力] 12V、3.33A
外部インタフェース	RS-232C×1
プリンター	サーマル外付けプリンター(感熱式)
外形寸法	W380×L550×H2126mm ※ヘッドバーが下がっている場合の高さ H1350mm
製品重量	14kg
測定時間	[体重測定] 2秒 [身長測定] 3秒 [体重・身長測定] 7秒未満
動作環境	[温度] 10~40℃ [湿度] 30~75%RH [気圧] 70~106kPa
保管環境	[温度] -20~70℃ [湿度] 10~95%RH [気圧] 50~106kPa

\*性能改良のため仕様・デザインは予告なしで変更することがありますのでご了承ください。

外国製造業者(InBody Co., Ltd. Factory)が取得している認証



**InBody** 株式会社インボディ・ジャパン [www.inbody.co.jp](http://www.inbody.co.jp)

東京本社	〒136-0071 東京都江東区亀戸 1-28-6 タニビル
	Tel 03-5875-5780 Fax 03-5875-5781
大阪営業所	Tel 06-6155-6937 Fax 06-6155-6938
仙台営業所	Tel 022-302-6301 Fax 022-302-6302
名古屋営業所	Tel 052-684-9616 Fax 052-684-9617
広島営業所	Tel 082-236-7630 Fax 082-236-7631
松山営業所	Tel 089-948-9073 Fax 089-948-9074
福岡営業所	Tel 092-292-1766 Fax 092-292-1776

InBody、LookinBodyは株式会社インボディ・ジャパンの登録商標です。


### オプション



サーマルプリンター



遠隔操作ユニット

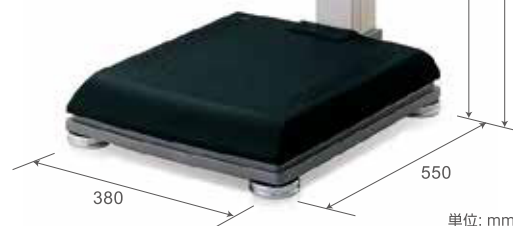

QRコードを読み取ると、製品紹介をYouTubeで見ることができます。